

### Klargøring:

1. Tag pumpen ud af køleskabet ca. 30 minutter før brug.
2. Kontroller patientens IV-adgang.
3. Fjern den lille blå hætte fra enden af infusionsslangen.
4. Åbn klemmen.
5. Kontrollér, at der kommer en dråbe ud af slangen.
6. Luk klemmen.


### Tilslutning af pumpen:

1. Tilslut pumpen til patientens IV-adgang.
2. Fastgør den farvede flow-regulator til patientens hud med plaster.
3. Åbn den hvide klemme.
4. Sørg for, at luftfilteret ikke er tildækket af plaster eller tape.
5. Placér pumpen i niveau med patientens IV-adgang.

### Frakobling af pumpen:

1. Luk den hvide klemme.
2. Frigør flowregulatoren ved at fjerne plasteret.
3. Frigør pumpen fra patientens IV-adgang.

# SUREFUSER™+

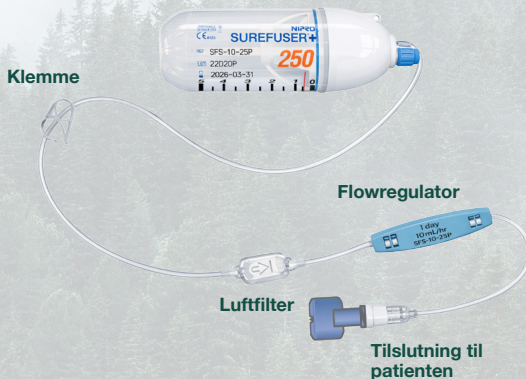

# SUREFUSER™+

## Hvad skal du gøre i tilfælde af...?

### Luft i infusionsslangen

- Hvis der er luft i infusionsslangen efter luftfilteret, skal den behandlingsansvarlige afdeling kontaktes.
- Hvis behandlingen skal stoppes, lukkes klemmen straks.

### Tvivel om pumpen løber – marker den blå linjes placering på skalaen

- Kontrollér, at klemmen er åben.
- Kontrollér, at infusionsslangen ikke er snoet eller knækket.
- Tap/knips på flowregulatoren.
- Tjek, at den blå linjes placering har flyttet sig efter ca. 2 timer.
- Hvis den blå linje ikke har flyttet sig, luk klemmen og kontakt den behandlingsansvarlige afdeling.

### Utætheder

- Kontakt den behandlingsansvarlige afdeling.

Surefuser™+  
Patientvejledning

